

Image 3



Lit hospitalier à hauteur basse

Image 3 répond à tous vos besoins



Image 3 Standard



Image 3 Lavable

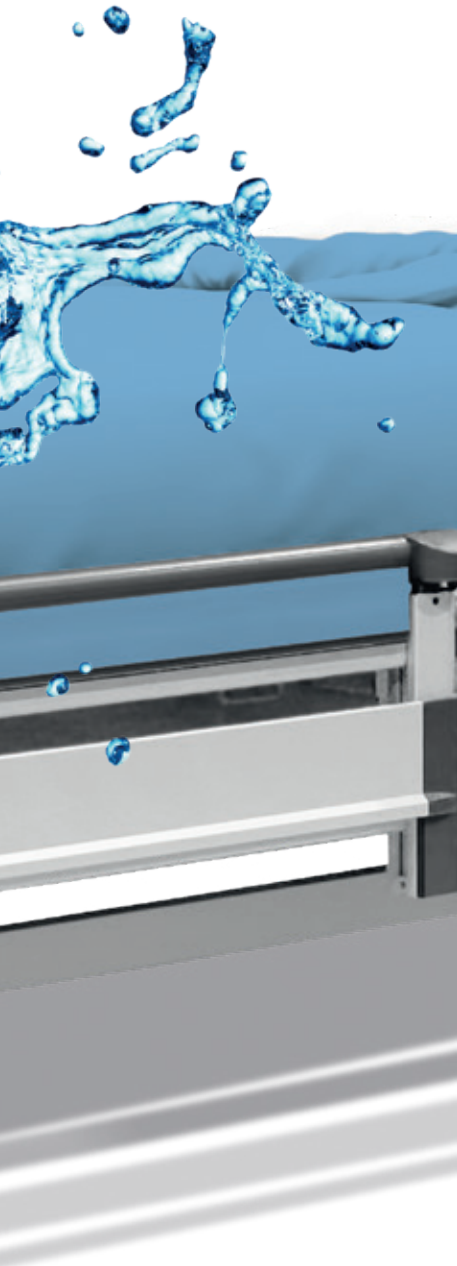


Image 3 XXL

Avantages de l'Image 3



position
basse
28_{cm}



- Position basse pour la prévention des chutes
- La demi-barrière représente une aide efficace à la mobilisation
- Concept unique et moderne associant confort et esthétique



Patient

- Manipulation confortable grâce à son ergonomie
- Positions automatiques préprogrammées
- Nettoyage facile du lit



Staff

- Usage universel : versions standard, lavable et pour patient corpulent
- Répond aux différents besoins en fonction des modèles
- Contrôle infectieux conforme aux normes strictes



Gestion

Satisfaire à tous les



Image 3 LAVABLE

Le lit est disponible dans une version adaptée au nettoyage et à la désinfection dans un tunnel de lavage.

- La construction du lit a subi une modification technologique spéciale qui prolonge sa durée de vie et améliore sa durabilité.

LIT
LAVABLE

Image 3 STANDARD

La conception moderne du lit Image 3 lui permet d'être utilisé dans divers services hospitaliers.

- En fonction de sa version, sa conception et ses accessoires, le lit peut être adapté à une utilisation spécifique.
- Le concept unique et moderne du lit permet de créer un environnement confortable et agréable dans les établissements médicaux.



besoins



Image 3 XXL

La version du lit Image 3 pour patient corpulent répond à la demande croissante de lits ayant une plus grande capacité de charge.

- Le lit possède un plan de couchage plus large.
- La charge de fonctionnement maximale en sécurité est de 320 kg.

LIT PLUS LARGE

CHARGE SUPERIEURE

Différentes versions

CONCEPTION POUR
ETABLISSEMENTS DE SOINS



CONCEPTION
EXCLUSIVE



CONCEPTION
UNIVERSELLE



La conception du lit est intemporelle et adaptée à un large éventail de besoins en matière de soins hospitaliers. Les lits Image 3 Standard, Lavable et XXL respectent tous les principes ergonomiques les plus stricts en matière de soins de santé.



Grâce à son concept classique, la version de l'image 3 pour établissements de soins s'adapte à la pratique de soins standards et propose également une version compatible avec le nettoyage dans un tunnel de lavage.



La conception exclusive est renforcée par une combinaison d'éléments en aluminium et de décors en bois. L'élégance de ces lits a un effet réconfortant et crée un environnement plaisant pour les patients et le personnel.



La conception simple permet de proposer un lit doté de fonctionnalités pratiques en version économique.

Sécurité du patient

La sécurité est un paramètre essentiel du lit Image 3. Toutes les fonctions du lit sont conçues pour que le patient se sente et soit réellement en sécurité, dans la mesure du possible.

Ergoframe®


Le positionnement spécial du plan de couchage réduit fortement le risque d'escarres de décubitus.



Hygiène

Grâce à la forme et au matériau utilisés, le lit et ses composants sont faciles à nettoyer.



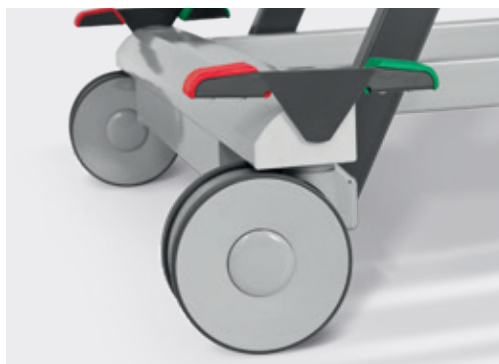

Alarme de frein))

Alar


me de frein

Une alarme sonore signale que le lit n'est pas freiné lorsqu'il est branché sur le secteur, et évite ainsi les chutes dues à son déplacement involontaire.



Bouton GO

Grâce à ce concept de sécurité breveté, les commandes du lit sont verrouillées au bout de 3 minutes d'inactivité. Cela prévient tout déplacement accidentel du lit.

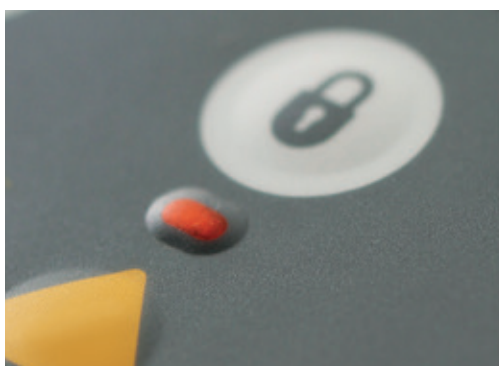

Verrouillage des fonctions

Les fonctions électriques du lit peuvent facilement être verrouillées.




SafeSense

L'alarme de sortie de lit SafeSense informe le personnel lorsqu'un patient quitte son lit.

Stratégie à 3 ARRÊTS

POSITION
D'EXAMEN

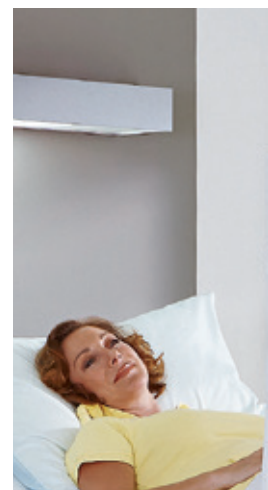

POSITION
DE MOBILISATION



POSITION
BASSE



STRATEGIE 3 ARRÊTS



Position d'examen

- La position du lit la plus haute permet au personnel de travailler dans les conditions ergonomiques idéales.
- Procédures et soins infirmiers confortables.
- La position permet un accès complet au lit pour le nettoyer et le désinfecter.

80
cm



Position de mobilisation

- Fonctions préprogrammées sur la commande pour une mobilisation simple.
- Associée à la barrière latérale, la position simplifie et favorise la mobilisation du patient.
- La configuration idéale pour le nettoyage dans un tunnel de lavage.

40
cm



Position basse

- Fonction accessible sur la commande soignant uniquement.
- Prévention des chutes.
- Position sûre pour dormir.


28
cm



Données techniques

- 1 La 5e roue permet une manipulation confortable dans tous les espaces
- 2 Rallonge de sommier rallonge intégrée de +10 +22 ou +30,5 cm en fonction des besoins
- 3 Veilleuse de nuit sous le plan de couchage pour que le patient s'oriente en toute sécurité
- 4 Des butées murales d'angle 3D protègent le lit en positions horizontale et verticale
- 5 Largeur du plan de couchage options de largeur du plan de couchage de 86 ou 90 cm, avec éléments en plastique amovibles
- 6 Le porte couverture peut également être utilisé pour ranger la commande soignant
- 7 CPR mécanique En cas d'urgence

Les coloris

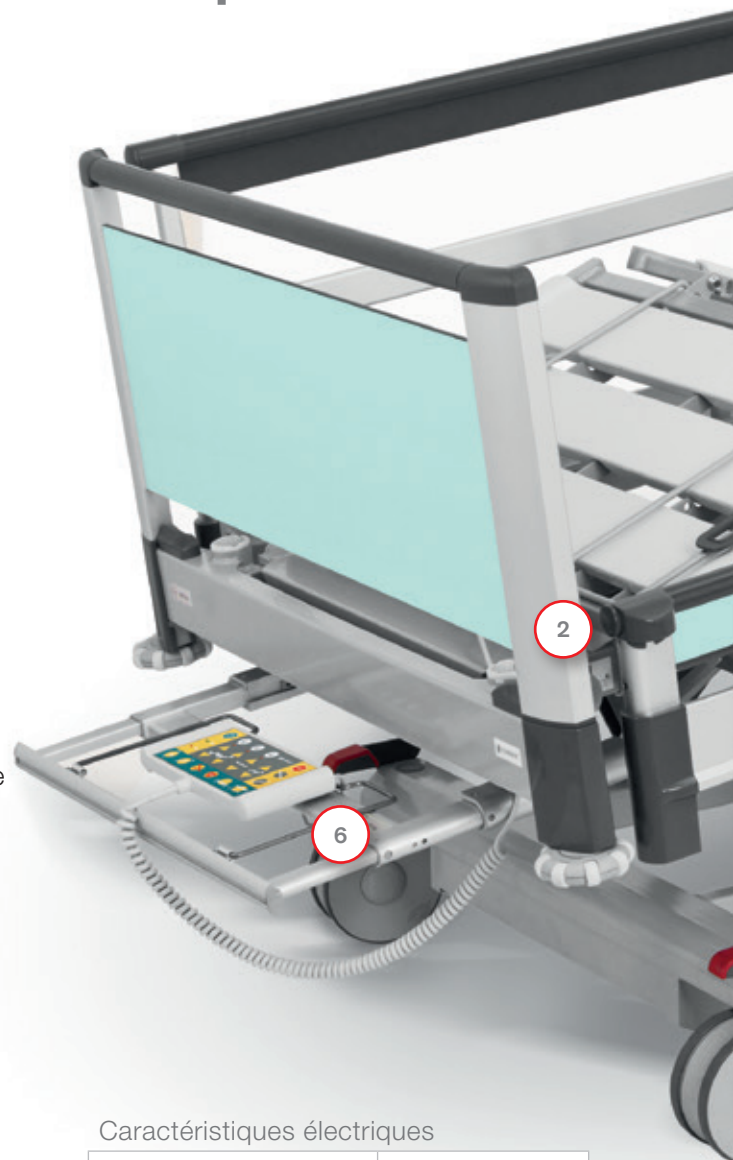

Caractéristiques électriques

Alimentation	230V/±10 %
Courant d'entrée maximal	max 1,6 A; 370 VA
Protection contre les infiltrations d'eau et de poussière	IPX4 (IPX6 pour Image 3 Lavable)

Certificats

LINET est certifié conforme aux normes européennes et au système de qualité :
ČSN EN 9001:2000, ČSN EN 13485:2003

Les produits sont fabriqués conformément aux normes européennes relatives à la technologie des soins de santé et aux lits d'hôpitaux :
CEI 60601-1, CEI 60601-2, CEI 60601-4,
CEI 60601-2-52, FR ISO 14941
Image 3 Lavable: AK-BWA:2009



Paramètres techniques	Image 3 (Standard, Lavable)	Image 3 (XXL)
Dimensions hors-tout	221 x 104 cm / 220 x 99,8 cm*	220 x 110 cm*
Dimensions du plan de couchage	200 x 86 / 90 cm	200 x 100 cm
Garde au sol	13 / 15,5 cm	13 / 15,5 cm
Hauteur variable	28 – 80 cm	28 – 80 cm
Rallonge de sommier	10; 22; 30,5 cm	10; 22; 30,5 cm
Hauteur maximale du matelas	18 cm (demi-barrières); 17 cm (barrières 3/4)	26 cm avec la rehausse de barrières
Charge de fonctionnement maximale en sécurité	265 kg (Standard) / 250 kg (Lavable)	320 kg
Poids du lit	160 kg *, **	160 kg *, **
Angle maximal du relève-buste	0 – 70°	0 – 70°
Angle maximal du relève-cuisses	0 – 34°	0 – 34°
Angle proclive/déclive	0 – 14°	0 – 14°

* selon configuration ; ** selon accessoires

Image 3

Patient

- Position basse pour la prévention des chutes
- La demi-barrière représente une aide efficace à la mobilisation
- Concept unique et moderne associant confort et esthétique



- Manipulation confortable grâce à son ergonomie
- Positions automatiques préprogrammées
- Nettoyage facile du lit



Personnel

Gestion

- Usage universel : versions standard, lavable et pour patient corpulent
- Répond aux différents besoins en fonction des modèles
- Contrôle infectieux conforme aux normes strictes



 wissner-
bosserhoff

LINET

Members of LINET Group

LINET FRANCE

7 rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Lès-Tours | FRANCE
Tél. : 02 47 80 31 80 | Fax : 02 47 80 31 81 | E-mail: info@linet.fr | www.linet.fr

